

¿Sabía que puede realizar un seguimiento completo de marcapasos desde la pantalla inicial Quick Look II?


>>> Utilidad Clínica

“El objetivo de una clínica [de marcapasos] debe incluir el mantenimiento de la función óptima del marcapasos de acuerdo a las necesidades del paciente, maximizar la longevidad del dispositivo, identificar cualquier problema o complicaciones relacionadas con el sistema de estimulación y asegurar un rápido reconocimiento de la depleción de la batería, permitiendo programar el reemplazo electivo del generador.”

Guías de estimulación cardiaca y de terapia de resincronización cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología European Heart Journal (2007) 28, 2256–229

La finalidad de esta ficha es guiarle a través de la pantalla inicial o Quick Look II para poder realizar un seguimiento de marcapasos de una manera rápida, automática, fiable y manteniendo la seguridad del paciente.

>>> ¿Cómo hacerlo? Integridad física

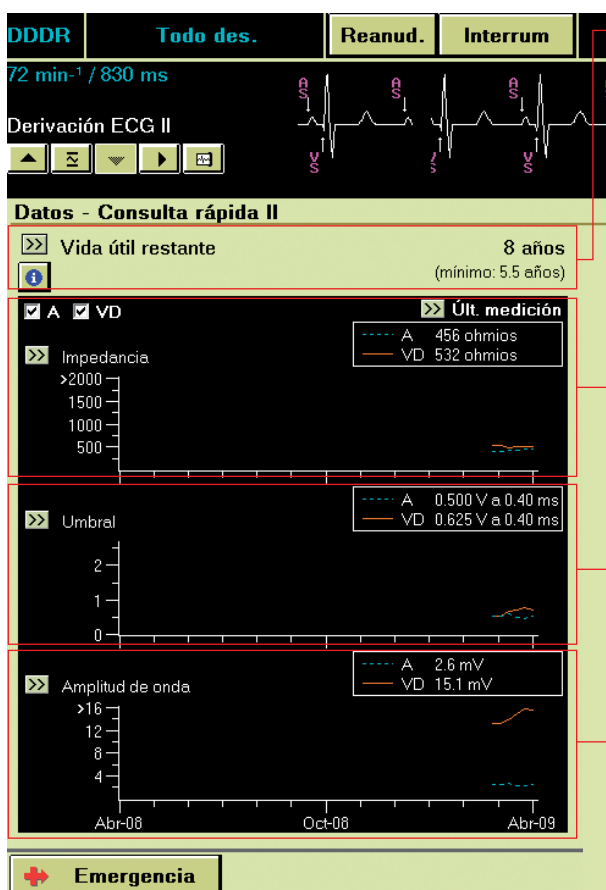

Estado de la batería:

Compruebe la longevidad media y mínima restante del marcapasos. En caso de que haya que reemplazar el marcapasos aparecerá la marca de RRT.

Impedancias:

La impedancia es medida periódicamente por el dispositivo. Compruebe que las impedancias tienen valores adecuados y que son estables. Pulsando sobre la flecha puede acceder a toda la información detallada de la impedancia de cable.

Umrales:

El control de captura ha medido el umbral y ajustado las salidas automáticamente. Compruebe que las medidas tienen valores adecuados y que son estables. Pulsando sobre la flecha puede acceder a toda la información detallada de los umrales.

Amplitud de onda:

El dispositivo le ofrece una tendencia semanal de la amplitud de las ondas R y P. Si pulsa sobre la flecha, podrá ver también la amplitud diaria de las ondas de los últimos 15 días.

¿Sabía que puede realizar un seguimiento completo de marcapasos desde la pantalla inicial Quick Look II?

>>> ¿Cómo hacerlo? Efectividad de la terapia

Comprobación del ritmo:

Evalúe si el ECG y el comportamiento del marcapasos, utilizando el canal de marcas, es correcto para su paciente. Pulsando sobre el botón cuadrado puede ver 3 derivaciones de ECG, así como los EGM's intracavitarios, que deben mostrar una señal límpia.

Resumen de programación:

Compruebe que los parámetros básicos de programación—modo de estimulación y frecuencias—son adecuados para su paciente. Si no lo son podrá modificarlos en la pantalla "Parámetros".

Porcentajes de estimulación:


Revise si los porcentajes de estimulación son adecuados para la indicación del paciente y el modo de estimulación programados.

Observaciones:


En la pantalla "Observaciones" encontrará datos relevantes sobre el estado del sistema o el paciente. Pulsando sobre cada observación y -a continuación- sobre el botón con la flecha, encontrará los datos detallados de dicha observación.

Episodios:

Compruebe el número de episodios de taquiarritmia ventriculares y auriculares. En el caso de haberlo, pulse sobre la flecha para ver los datos del episodio.

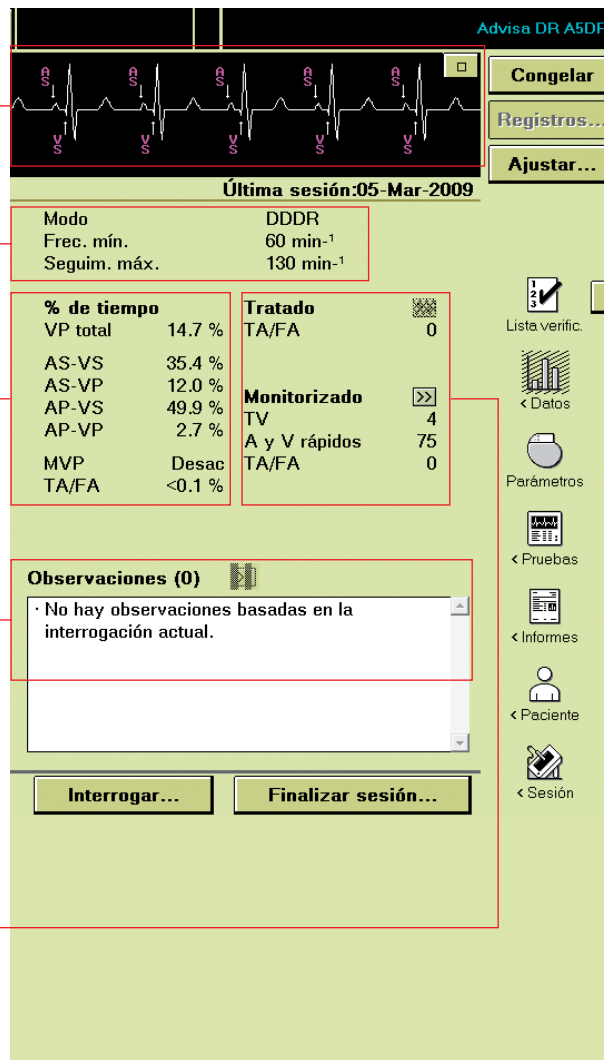

>>> Pruebas manuales

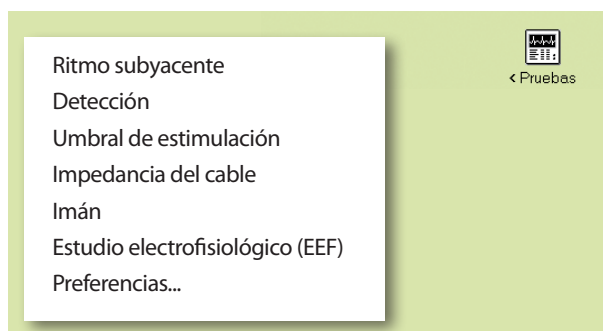

El dispositivo ha realizado todas las pruebas necesarias por usted. Aún así, si estos valores automáticos no son correctos, son inestables, o considera que debe realizar las pruebas de manera manual, puede realizar cualquiera de las pruebas descritas accediendo desde el menú "Pruebas".